

COLCHÃO DE AR MOTORIZADO AUTOMÁTICO **AXTAIR**

automorpho® plus



AJUDA NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO EM PACIENTES COM RISCO MÉDIO E ALTO

PARA PACIENTES QUE FICAM LEVANTADOS DURANTE O DIA E DEITADOS DURANTE MAIS DE 15 HORAS POR DIA É UMA AJUDA NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NAS 4 FASES ASSOCIADO À UTILIZAÇÃO DE POSICIONADORES.

PESO DO PACIENTE ATÉ 165 KG

- **Simplicidade de utilização** para os cuidadores de saúde.
- **Eficácia e segurança terapêuticas** para o paciente.
- Melhoria **da qualidade dos cuidados e da vida** do paciente.
- **Rastreabilidade ótima** mediante código QR
- **Pronto a utilizar** com saco de transporte.
- Baseado nos **fundamentos de eco-design**, respeitosos com o meio ambiente.
- **Concebido e fabricado na Europa.**



Com opção de envoltório CIC:



Antiodores



Antibacteriano



Antiácaros



Antifúngico

WINN CARE
g r o u p

Para pacientes com risco de UPP (Úlcera por pressão) **médio a elevado**

AXTAIR AUTOMORPHO PLUS

COLCHÃO

- 18 células de poliuretano éter independentes e extraíveis de 12cm de altura de ar terapêutico.
- Zona de cabeça: 2 células da cabeça estáticas cobertas por um traveseiro.
- Pés -Zone: 4 células para descarregar na área do calcanhar.
- Suporte de espuma de poliéter + 5 cm de espessura localizado em um compartimento independente.
- Abertura e fechamento da válvula CPR traseira rápido e confortável com uma única mão
- Tampa de transporte para autonomia simplificado e código QR nas laterais, de 8 horas
- 4 células para apoio para os calcanhares
- Guia para cabos (opcional)



Válvula CPR

(Reanimação cardiorrespiratória)

COMPRESOR

- Sistema patenteado para cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação, em função da morfologia do paciente.
- 3 modos terapêuticos: dinâmico, estático ou cuidados de saúde.
- Gestão da posição de sentado (>30°)
- Ajuste do conforto em todos os modos e posições do paciente: Regulação do posições do paciente: Regulação do nível de pressão.
- Alarmes visuais e sonoros.
- Número de série na parte de trás do compressor: manual de instruções simplificado e código QR nas laterais.




OPÇÃO:


Bomba de insuflação rápida

FUNDAS DISPONIBLES

- Lado superior: bielástico, impermeável a líquidos e respirável a vapor de água.
- Lado inferior: base antideslizante
- 2 envoltórios disponíveis:
 - PROMUST PU HD (envoltório preto)
 - PROMUST CIC (envoltório azul)
 tratamento antibacteriano com iões de prata (antifúngico, antiácidos, antibacteriano e anti-odor)

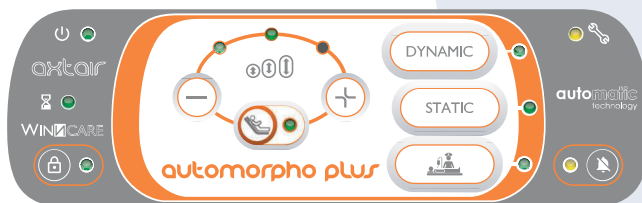

Número de rastreamento no verso compressor (n° série)

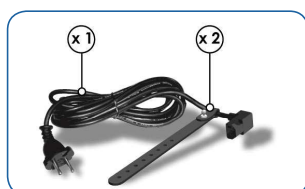

Novo cabo com 2 sistemas de fixação ao sommier



Material antideslizante na parte inferior



Saco de transporte com identificação do na parte frontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES / PESO	PESO PACIENTE	NORMATIVA DE FOGO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + colchão) Envoltório integral para Promust PU HD Para camas de 90 cm	VAXT4/ AUTO-P	195 x 87x17 cm	30 to 165 Kg	EN 597-1 and 2 GPEM D1 90 Classe D	Colchão Válvula CPR de emergência 18 células de poliuretano com base de éter (300 µ) independentes e extraíveis de 12 cm de altura de ar medicinal. 2 células estáticas na zona da cabeça revestidas com uma almofada conforto 4 pontos de apoio para os calcanhares de série. Suporte em espuma poliéter extraível com + 5 cm de espessura, situado num compartimento independente (densidade 18 kg/m3, sustentação 3,5 kPa) Compressor Medidas: 22 x 25 x 11,5 cm Peso: 2,7 kg Modo dinâmico (alternante): 1 de cada 2 células. Tempo do ciclo completo: de 9 a 14 minutos. Sistema patenteado de cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação. Ajuste personalizado do conforto Alarmes visuais e sonoros Fluxo > 71 / min. Alimentação elétrica: 220-240 V - 50 Hz Classe II Tipo BF Consumo médio: 5 Wh Decibéis do compressor: Nível de ruído conforme a norma NF EN3744: <35 dBA Conformidade elétrica e eletromagnética com as normas IEC 60601-1
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + Colchão) Envoltório integral para Promust CIC Para camas de 90 cm	VAXT4/ CIC-P	8kg			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + Colchão) Envoltório integral para Promust PU HD Para camas de 100 cm	VAXT4/ AUTO100-P	195 x 97x17 cm			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + Colchão) Envoltório integral para Promust CIC Para camas de 100 cm	VAXT4/ CIC100-P	10kg			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + Colchão) Envoltório integral para Promust PU HD Para camas de 120 cm	VAXT4/ AUTO120-P	195 x 117 x 17 cm 12kg			

Manutenção Promust PU HD



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.