

# DELTA madras

Tryksårsforebyggede skummadras op til sårstadiet 3.

## Primær anvendelse

Kommuner  
Institutioner  
Hospitaller

Delta skummadras fra Ergolet WinnCare ApS anvendes primært til brugere med risiko for tryksår op til stadium 3.

## Delta skummadras vælges fordi den er:

- Udført med en blød profileret trykaflastende viskoelastisk skum, der sikrer optimal liggekomfort for brugeren.
- Nedsænket med 3 cm ved hælene, som giver en trykaflastning der går helt fra skulderpartiet og ned til og med hælene.
- God til at transpirere fugtighed fra kroppen væk med udgangspunkt i den viskoelastiske profilerede skum kombineret med Dahlia betræk.
- Beregnet til senge med indstillelig sengebund
- Velegnet til brugere med risiko for udvikling af tryksår

## Hertil kommer at Delta skummadras er forsynet med:

- Åndbart inkontinensbetræk – Dahlia betræk, som er strækbart i flere retninger
- Betræk som er allergivenligt og brandhæmmende
- Mulighed for forlængerstykker på henholdsvis 10, 15 eller 20 cm

## Delta skummadras er opbygget af:


- 9 cm HR skum i bunden - de 3 cm sænkning er skåret i HR skummet
  - 5 cm viskoelastisk profileret skum på toppen.
- Begge skumtyper i høj kvalitet.

Brugeren får ved anvendelse af Delta skummadras en god følelse af, at kroppen bliver støttet, samtidig med at madrassen yder en forebyggende trykaflastende effekt.

## Åndbart betræk

Delta skummadras er forsynet med åndbart inkontinens Dahlia betræk, som er strækbart i flere retninger. Dahlia betrækket er:

- Svejst og ikke syet sammen
- Tæt i forhold til indtrængning af urin, blod eller lignende væsker
- Forsynet med 2 håndtag på hver side til håndtering af madrassen samt 1 håndtag i henholdsvis hoved- og fodende.
- Lynlås på alle 4 sider
- 6 cm overlap ved lynlås
- Kraftig kvalitet af lynlås
- Anti-skrid i bunden
- Nemt at af- og påmontere på grund af en tricot, som madrassen er forsynet med

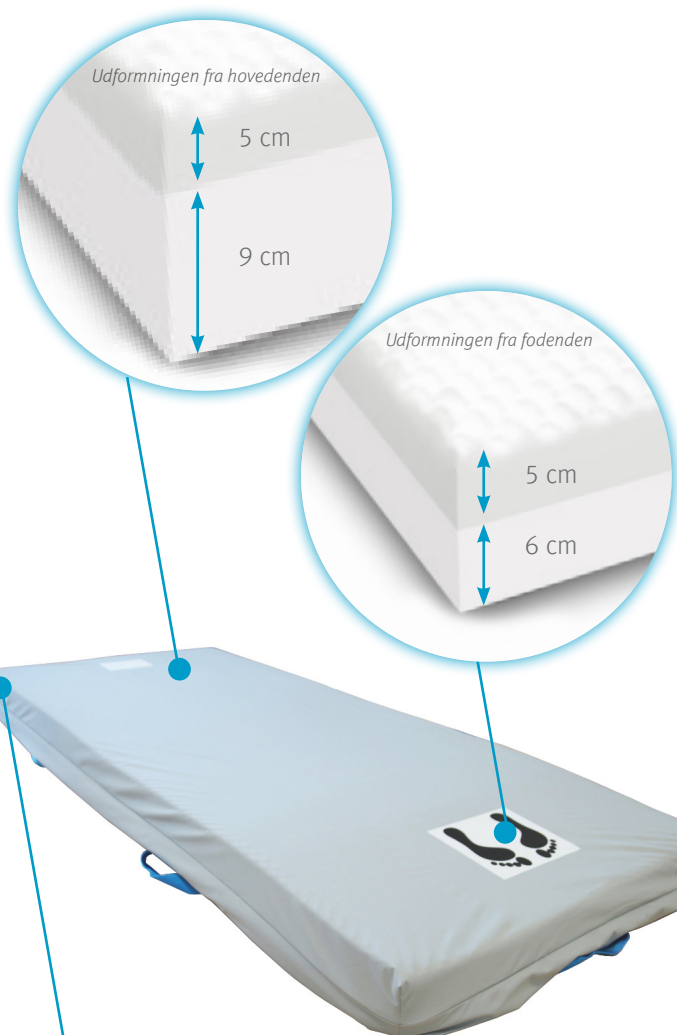


Madrasforlænger til hovedgære



Ekstra stykke stof, der fastholder forlængerstykke og madras sammen.



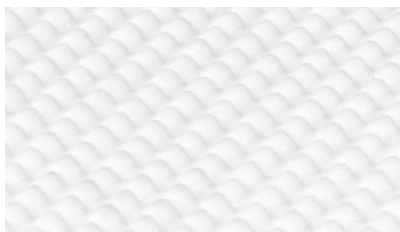

Profileringen af det viskoelastiskeskum er vaflet som en æggebakke.



Inkontinensbetræk, som sikrer, at væsker som f. eks. urin og blod ikke trænger igennem. Der er 4 håndtag - 2 på hver side og et i hoved- og fodende. Betrækket er svejst ved lynlåsene. Det er vaskbart ved 90 grader og kan autoklaveres.



### Rengøringsmetode:

Som udgangspunkt kræver madrassen ikke rengøring, idet den er monteret med et åndbart betræk med væskebarriere. Skulle der være behov for, at madrassen skal rengøres kan madrassen rengøres med alm. vand og sæbe.

Madrassen tåler desinficering med Ethanol 70%. Man skal dog være opmærksom på at den skal tørres efter med vand.


Madrassen må ikke gennemvædes, idet det øger risikoen for at beskadige skummet. Når madrassen er fugtig, må den ikke udsættes for tryk (fra f.eks. betræk) eller andre belastninger under rens/vask/tørring, idet dette kan medvirke til at beskadige skummet og deformere madrassen.

Øvrige rengøringsmidler med alkohol og blegemidler kan være skadelig for madras og betræk.

Version	Mål	HMI-nr	Varenummer
Delta skummadras	83 cm x 200 cm x 14 cm	79885	023-00000
Delta skummadras	88 cm x 200 cm x 14 cm	79886	023-00001
Tilbehør	Mål	Varenummer	
Madrasforlænger	83 cm x 10 cm x 14 cm	023-00012	
Madrasforlænger	88 cm x 10 cm x 14 cm	023-00014	
Madrasforlænger	83 cm x 15 cm x 14 cm	023-00006	
Madrasforlænger	88 cm x 15 cm x 14 cm	023-00007	
Madrasforlænger	83 cm x 20 cm x 14 cm	023-00013	
Madrasforlænger	88 cm x 20 cm x 14 cm	023-00015	
Dahlia betræk til madras	83 cm x 200 cm x 14 cm	023-00041	
Dahlia betræk til madras	88 cm x 200 cm x 14 cm	023-00042	
Dahlia betræk til madrasforlænger	83 cm x 200 cm x 10 cm	023-00016	
Dahlia betræk til madrasforlænger	83 cm x 200 cm x 15 cm	023-00010	
Dahlia betræk til madrasforlænger	83 cm x 200 cm x 20 cm	023-00017	
Dahlia betræk til madrasforlænger	88 cm x 200 cm x 10 cm	023-00030	
Dahlia betræk til madrasforlænger	88 cm x 200 cm x 15 cm	023-00011	
Dahlia betræk til madrasforlænger	88 cm x 200 cm x 20 cm	023-00029	

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Min. brugervægt	30 kg
Max brugervægt	140 kg
Bredde Delta 83 cm	830 mm
Bredde Delta 88 cm	880 mm
Længde	2000 mm
Højde	140 mm
Vægt Delta 83 cm	10,3 kg
Vægt Delta 88 cm	10,8 kg
Rumvægt:	
Koldskum	36 kg/m <sup>3</sup> , indtrykshårdhed 150 Newton
Viskoelastisk skum	48 kg/m <sup>3</sup> , indtrykshårdhed 100 Newton
Forventet levetid	5 år

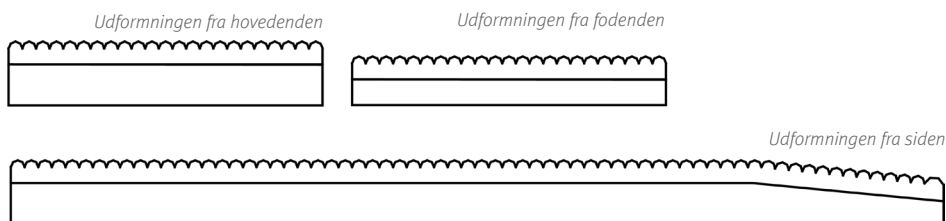

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende, og kan ændre sig i forskellige situationer. Ergolet Winncare ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.



date 09.11.2016 - ver 7

WinnCare Nordic ApS  
Tårnborgevej 12C  
4220 Korsør  
Danmark  
tlf. +45 70 27 37 20  
e-mail: info@winnCare.dk

[www.winnCare.dk](http://www.winnCare.dk)

**WINN**CARE  
N o r d i c