



## COJÍN KINERIS

Facilidad y precisión en el ajuste de presión.

EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIO

CUIDAMOS DE LAS PERSONAS CON  
PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y DE SUS  
CUIDADORES.

WIN  CARE

## ¿POR QUÉ ESCOGER EL COJÍN KINERIS?

Disponible 12 tallas, y 2 fundas.

Permite seguir y ajustar las disimetrías de la pelvis para favorecer el correcto posicionamiento del paciente.

Perfecta adaptación a la morfología del paciente para la prevención de las zonas de mayor riesgo.


Reducción de los efectos de maceración debido a la circulación de aire entre las bases de las celdas

Se entrega con un manómetro de serie, y una tabla de equivalencia peso/presión para facilitar el ajuste.


- Ayuda para la prevención de las **úlceras por presión** en pacientes de **MUY ALTO RIESGO**.
- Confinado a una silla durante **8-10 horas al día**.
- Limitación de las fuerzas de cizallamiento mediante la movilidad de sus celdas.



40 ≤ 200 kg

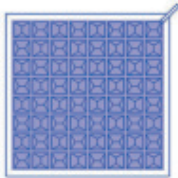

Monocompartimento para usuarios SIN trastorno de la estabilidad. Altura 7 cm.

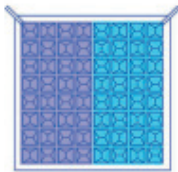


Bicompartimento para usuarios CON trastorno de la estabilidad. Altura 10 m.




Reparto de presiones en un paciente de 172 cm y 75 Kgs.


Cójin de gel de poliuretano viscoelástico

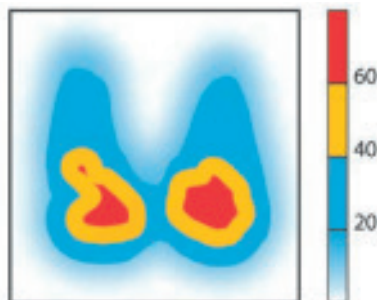

Cójin de espuma HR (alta resiliencia) de 6 cm

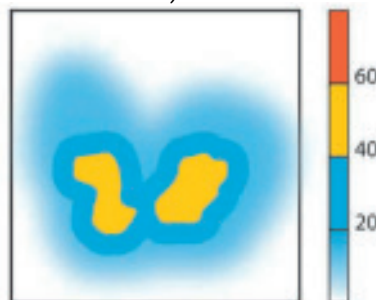

Cójin KINERIS mono compartimento

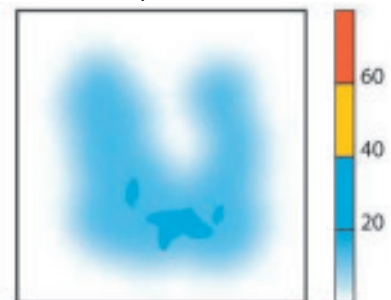

- Correlacione el peso y la altura del paciente en la matriz de Kineris.
- Identifique el producto recomendado consultando el código de colores.
- Compruebe que la anchura del asiento del cojín se adapta a la anchura de la pelvis del paciente.



### KINÉRIS® / Funda integral extraíble. Base antideslizante

#### ALTURA DEL COJÍN 7 CM


Mono Compartimento	BI Compartimento	Peso Paciente Kg	Dimensiones A X B
V367-1EL	V367-2EL	40 a 55	28,5 x 28,5 cm
V427-1EL	V427-2EL	40 a 45	28,5 x 33 cm
V497-1EL	V497-2EL	50 a 60	33 x 33 cm
V567-1EL	V567-2EL	40 a 65	33 x 37,5 cm
V667-1EL	-	-	36 x 36 cm
V647-1EL	V647-2EL	50 a 75	37,5 x 37,5 cm
V727-1EL	V727-2EL	50 a 85	37,5 x 42 cm
V817-1EL	V817-2EL	55 a 90	42 x 42 cm
V907-1EL	V907-2EL	85 a 120	42 x 46,5 cm
V677-1EL	-	-	43 x 36 cm
V777-1EL	-	-	43 x 42 cm
V107-1EL	V107-2EL	110 a 120	46,5 x 46,5 cm



# LA MATRIZ KINERIS

Presión de inflado (valores en mmHg)

## MATRIZ KINERIS

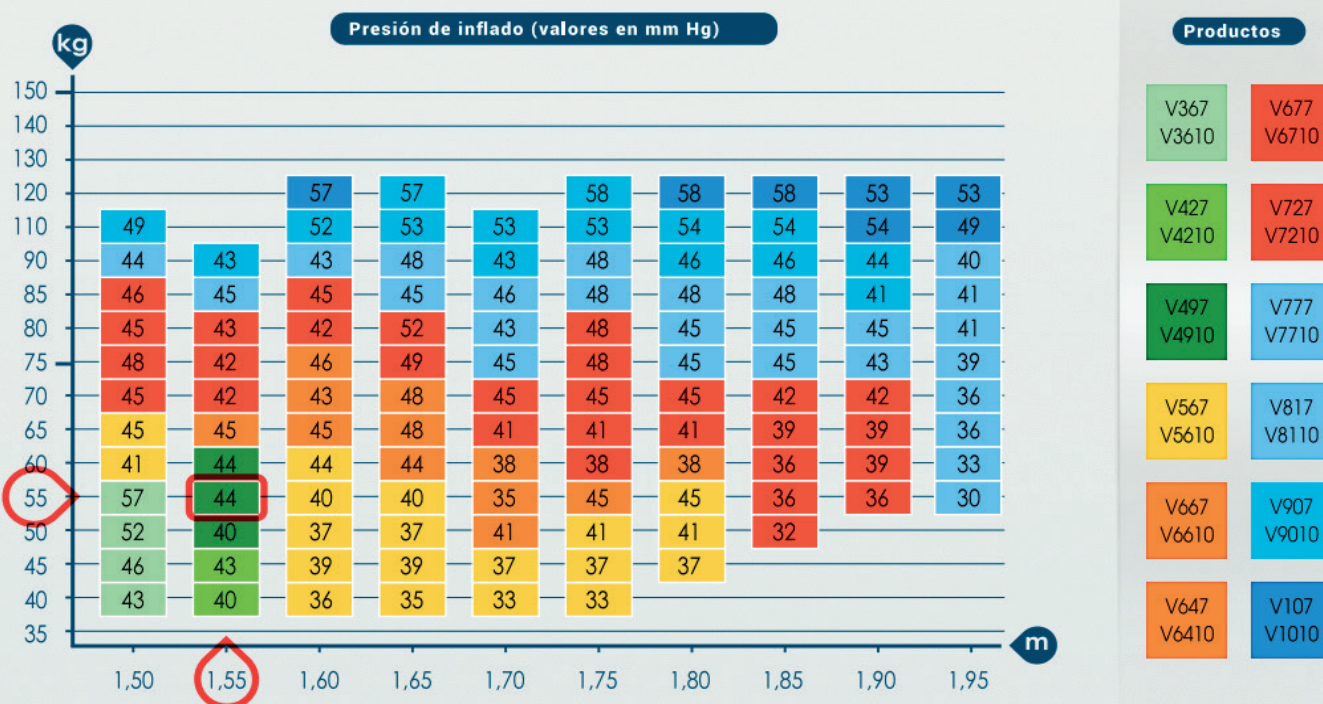

El prescriptor debe asegurarse de que el paciente o sus cuidadores puedan ajustar el apoyo. El prescriptor debe recomendar una consulta en el plazo de un mes.

### KINÉRIS® / Funda integral extraíble. Base antideslizante

#### ALTURA DEL COJÍN 10 CM

Mono Compartimento	BI Compartimento	Peso Paciente Kg	Dimensiones A X B
V3610-1EL	V3610-2EL	40 a 55	28,5 x 28,5 cm
V4210-1EL	V4210-2EL	40 a 45	28,5 x 33 cm
V4910-1EL	V4910-2EL	50 a 60	33 x 33 cm
V5610-1EL	V5610-2EL	40 a 65	33 x 37,5 cm
V6610-1EL	-	-	36 x 36 cm
V6410-1EL	V6410-2EL	50 a 75	37,5 x 37,5 cm
V7210-1EL	V7210-2EL	50 a 85	37,5 x 42 cm
V8110-1EL	V8110-2EL	55 a 90	42 x 42 cm
V9010-1EL	V9010-2EL	85 a 120	42 x 46,5 cm
V6710-1EL	-	-	43 x 36 cm
V7710-1EL	-	-	43 x 42 cm
V1010-1EL	V1010-2EL	110 a 120	46,5 x 46,5 cm

## FUNDA

**Funda desenfundable completamente**, hilo SMB en PES FR (superficie de poliéster / poliuretano + elastano):


- Transpirable.
- Bielástica.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Resistente al moho y a la luz.
- Inarrugable.
- Antialérgico (Oeko-Tex clase2).
- Retardante al fuego.
- Lavado a 40°C. (Lavado puntual posible a 90°C).

## EL NEOPRENO

Nuestro material sin látex es hipoalergénico.

Su flexibilidad y forma específica permite envolver y sostener al paciente durante todo el día con la menor presión posible (en comparación con otras tecnologías de espuma)



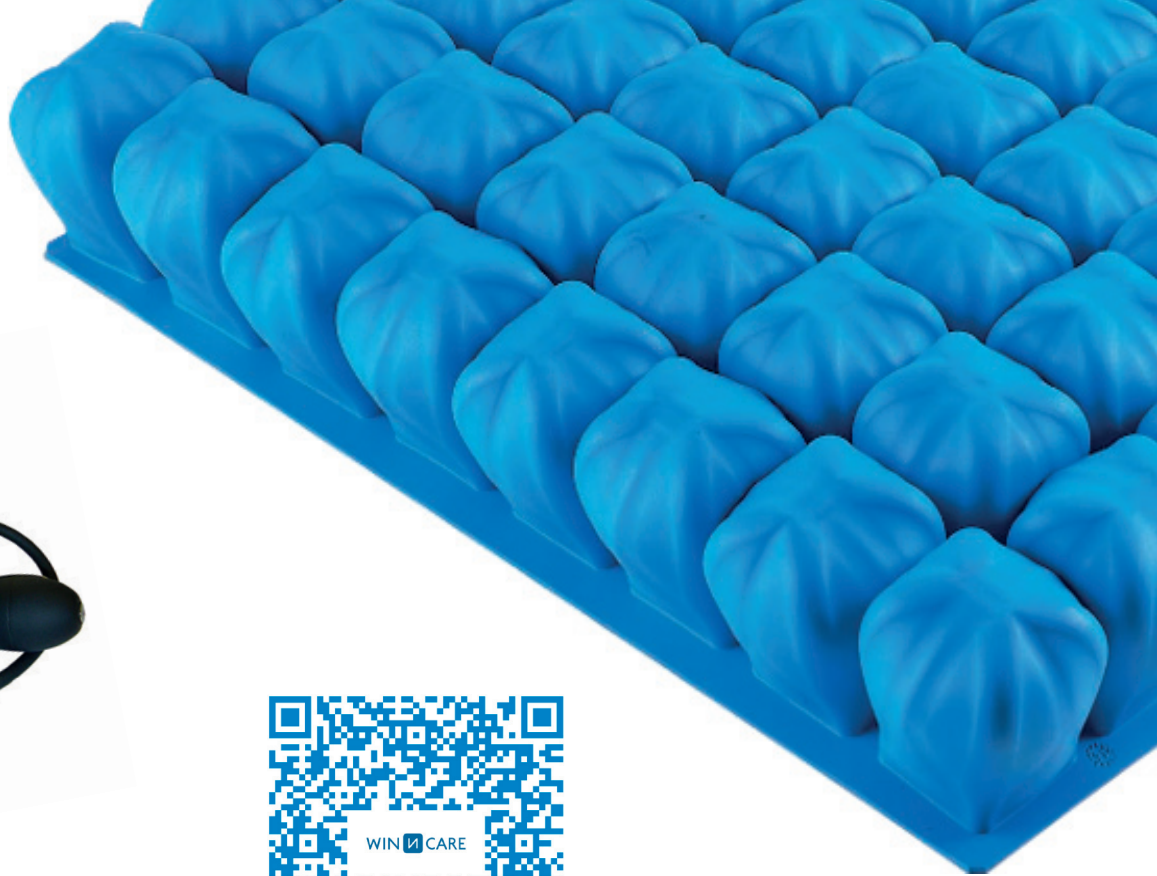

## MANÓMETRO

- Se entrega con su manómetro de serie.
- Se suministra una tabla de equivalencia peso/presión para facilitar el ajuste



**Facilidad y precisión en el ajuste de presión, gracias al sistema de inflado con manómetro**



**WinnCare Spain**

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: [ventas@winnCare.es](mailto:ventas@winnCare.es)

Web: [winnCare.com](http://winnCare.com)

Blog: [wearewinnCare.com](http://wearewinnCare.com)



@winncarespain