

# COLCHÃO DE AR MOTORIZADO°

## axtair one® plus

AJUDA NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS EM PESSOAS COM RISCO DE MÉDIO A ELEVADO, LEVANTADAS

DURANTE O DIA E DEITADAS MAIS DE 15 HORAS POR DIA.

AJUDA NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS NO ESTÁGIO DE 1 A 2.

ASSOCIADO AO USO DE POSICIONADORES.

PARA PACIENTES DE 30 KG ATÉ 150 KG.

- **Eficácia terapêutica** nos primeiros estágios da úlcera.
- **Simplicidade de utilização** para os cuidadores.
- **Ajuda no diagnóstico técnico** através do código QR,ç
- **Pronto a utilizar** com saco de transporte.
- Desenvolvido a partir de um **eco-conceito** respeitoso com o meio ambiente.
- **Concebido e fabricado na Europa.**



Com opção de envoltório CIC:



Antiodores



Antibacteriano



Antiácaros



Antifúngico

WINNCARE  
g r o u p

Para pacientes com risco de UPP (Úlcera por pressão) **médio a elevado**

## COLCHÃO

- 18 células de poliuretano com base éter de ar medicinal independentes e removíveis de 12cm.
- Base de espuma de poliéster de +5 cm de espessura situado num independente.
- Abertura e fechamento da válvula CPR rápido e confortável com uma única mão.
- Tampa de transporte para autonomia de 8 horas
- Guia para cabos (opcional)

## COMPRESSOR

- Sistema patenteado de cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação, em função da morfologia do paciente.
- 1 modos terapêutico: Alternância de pressões.
- Gestão da posição de sentado (>30°)
- Ajuste do conforto: regulação do nível de pressão.
- Alarmes visuais e sonoros.
- Número de série na parte posterior do compressor: manual de instruções simples e código QR nas laterais.

## ENVOLTÓRIOS DISPONÍVEIS

- Lado superior: bielástica, impermeável aos líquidos e transpirável ao vapor de água.
- Lado inferior: base antideslizante
- 2 envoltórios disponíveis:
  - PROMUST PU HD (ENVOLTÓRIO PRETO) COMPARTIMENTO
  - PROMUST CIC (envoltório azul) com tratamento antibacteriano com iões de prata (antifúngico, antiácidos, antibacteriano e antiodores).




Válvula CPR  
(Reanimação cardiopulmonar)



OPÇÃO:  
Bomba de insuflação rápida



Número de rastreamento no verso compressor (n° série)

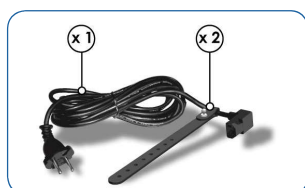

Novo cabo com 2 sistemas de fixação ao sommier



Material antideslizante na parte inferior



Saco de transporte com identificação do na parte frontal

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES / PESO	PESO PACIENTE	NORMA DE FOGO	CARACTERÍSTICA TÉCNICAS
AXTAIR ONE® PLUS (compressor+colchão) Envoltório Promust PU Para camas de 90 cm de largura	VAXT2/ ONE-P	195 x 87 x 17 cm  8kg	30 a 150 Kg	EN 597-1 and 2 GPEM D I 90 Classe D	<p>Colchão</p> <p>Válvula CPR de emergência 18 células de poliuretano com base éter (300 µ) independentes e extraíveis com 12 cm de altura de ar medicinal. Suporte em espuma poliéster extraível de + 5 cm de espessura, situado num compartimento independente (densidade 18kg/m3, sustentação 3,5 kPa)</p> <p>Compressor</p> <p>Medidas: 22 x 25 x 11,5 cm</p> <p>Peso: 2,7 kg</p> <p>Modo dinâmico (alternante): 1 de cada 2 células.</p> <p>Tempo do ciclo completo: de 9 a 14 minutos.</p> <p>Sistema patenteado de cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação.</p> <p>Ajuste conforto personalizado</p> <p>Alarmes visuais e sonoros</p> <p>Fluxo &gt; 7l/min.</p> <p>Alimentação elétrica: 220-240 V - 50 Hz</p> <p>Classe II tipo BF</p> <p>Consumo médio: 5 Wh</p> <p>Decibéis do compressor:</p> <p>Nível de ruído conforme a norma NF EN3744: &lt;35 dBA</p> <p>Conformidade elétrica e eletromagnética de acordo com as normas IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2</p>
AXTAIR ONE® PLUS (compressor+colchão) Envoltório Promust CIC Para camas de 90 cm de largura	VAXT2/ ONE/CIC-P				

Manutenção: Fundas Promust PU y CIC



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.