





COLCHÃO ALOVA® GAMA VMA62

O colchão estático mais preventivo
do mercado.

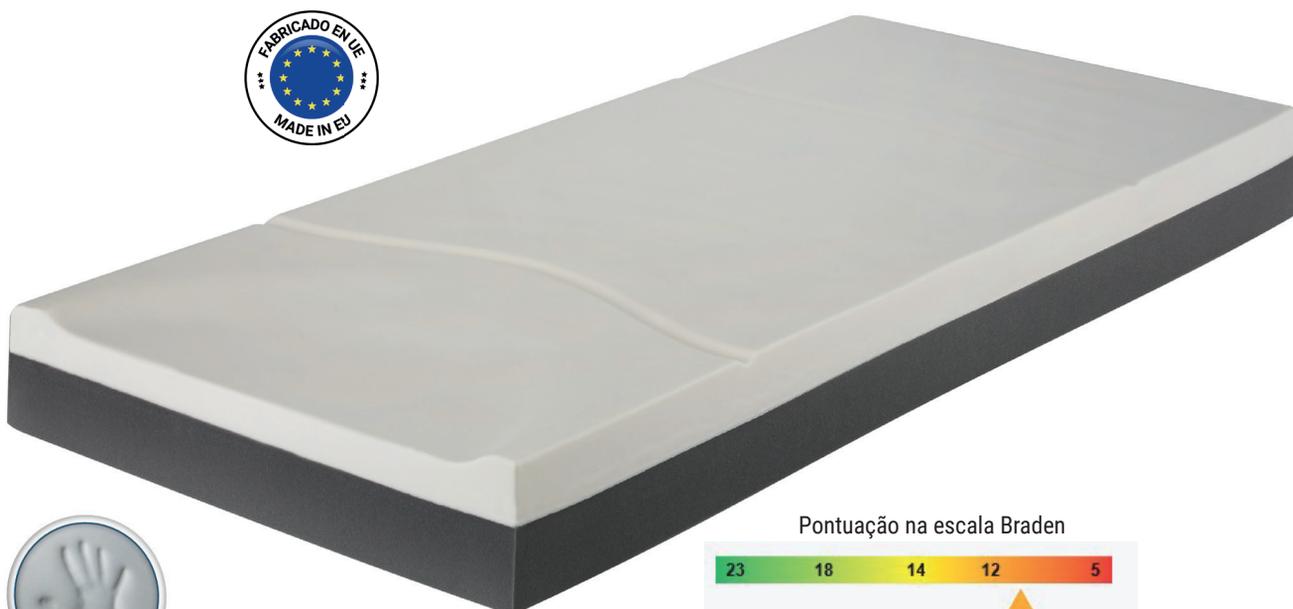

Pontuação na escala Braden

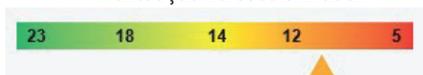

ELEVADO

CUIDAMOS DAS PESSOAS COM PERDA DE AUTONOMIA E SEUS CUIDADORES

EXPERIÊNCIA DO PRODUCTO

SOLUÇÕES TERAPÊUTICAS

EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO



WIN  CARE

PORQUÊ ESCOLHER O COLCHÃO ALOVA?

Redução óptima da pressão nas áreas de risco. Graças ao relevo do calcanhar e às zonas de firmeza diferenciadas.

A alta densidade de 80 kg/m³ garante uma redução máxima da pressão para uma prevenção óptima das escaras.

A imersão uniforme do corpo na espuma permite que a pressão seja distribuída por uma superfície maior, reduzindo assim os pontos de pressão em áreas em risco de úlceras de pressão.

A espuma viscoelástica é leve e macia e oferece conforto ao deitar-se.


As diferentes elevações são adaptadas a cada área do corpo (cabeça/sacral/calcanhar).

- Paciente confinado à cama durante mais de 15 horas por dia. Ajuda para o tratamento das UPP das fases 1 a 2 associadas à descarga localizada.
- Colchão monobloco multi-densidade composto por um topo de espuma viscoelástica de 6 cm e uma base de espuma de poliéter de 8 cm.
- Garantia de 3 anos.

A COMBINAÇÃO DA ALTA DENSIDADE DE 80 KG/M3 E O RELEVO DO CALCANHAR, AJUDA À PREVENÇÃO TOTAL DO UPP.




Manutenção Promust PU (HD)

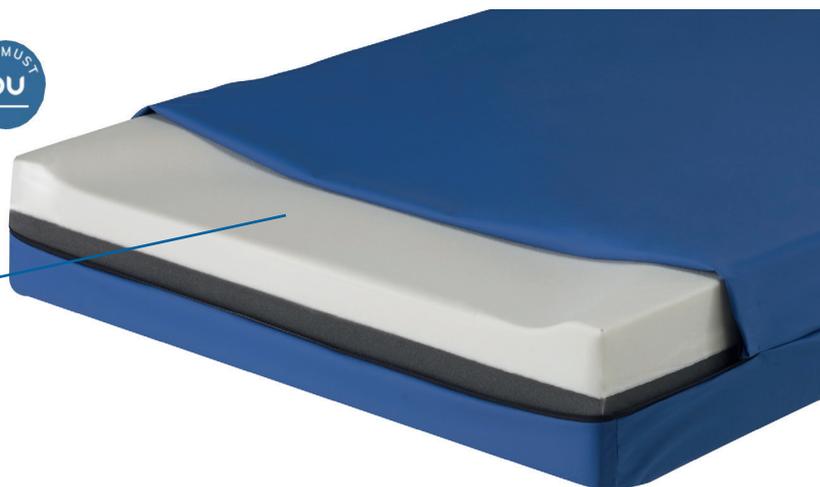


LIBERTAÇÃO DE CUIDADOS

Ajuda a melhorar o fluxo vascular nos calcanhares.
Reduz a pressão nesta área em risco de PU.

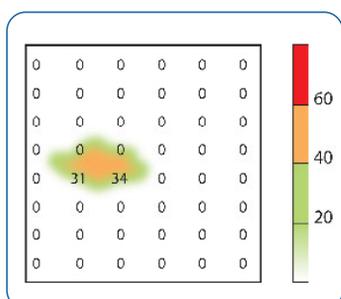

Colchão sem zona de apoio de calcanhar

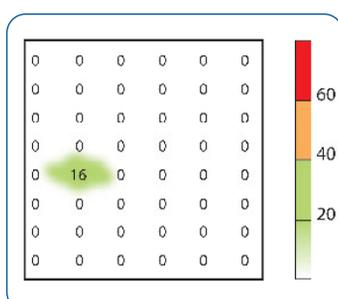

Colchão ALOVA com zona de apoio para os calcanhares

Redução ótima das pressões nas zonas de risco. Graças à zona de apoio para os calcanhares e as zonas com firmeza diferenciada.

Exemplo: distribuição das pressões ao nível do calcanhares num paciente de 1,76 m e 70 kg. (Unidade: mm de hg)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA SEGUNDO APRESENTAÇÃO E ACONDICIONAMENTO			DIMENSÕES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDADE
	CAIXA	PALET BOX (10 Un)	ROLO COMPRIMIDO				
ALOVA DT monobloco multizona, capa Promust PU	-----	VMA62-HIP3-190	VMA62RC1-HIP3-190 (1 ud)	190 x 88 x14	20 a 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEN D1 90 classe D	80Kg/m3
ALOVA DT monobloco multizona, capa Promust PU	VMA62C-HIP	VMA62-HIP	VMA62RC1-HIP (1 ud) VMA62RC-HIP (5 uds)	195 x 88 x14			
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3	VMA62RC-HIP3 (5 uds)				



WIN CARE



WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winncare.es

Web: winncare.com

Blog: wearewinncare.com



@winncarespain

