



ALMOFADA KINERIS

Facilidade e precisão no ajuste da pressão

EXPERIÊNCIA DE PRODUTO

SOLUÇÕES TERAPÊUTICAS

EXPERIÊNCIA DE SERVIÇO

PREOCUPAMO-NOS COM AS PESSOAS
COM PERDA DE AUTONOMIA E DOS
SEUS CUIDADORES

WIN  CARE

PORQUÊ ESCOLHER A ALMOFADA KINERIS?

Disponível em 12 tamanhos e 2 fundas

Permite o seguimento e ajuste de dismetrias pélvicas para promover o posicionamento correcto do paciente

Adaptação perfeita à morfologia do doente para a prevenção de áreas de alto risco


Redução dos efeitos de maceração devido à circulação de ar entre as bases das células de ar.

Fornecido com um manómetro como padrão, e uma tabela de equivalência peso/pressão para fácil ajuste


- Ajudas na prevenção de úlceras de pressão em doentes com **RISCO MUITO ALTO**.
- Confinado a uma cadeira durante **8-10 horas por dia**.
- Limitação das forças de cisalhamento através da mobilidade das suas células.



40 ≤ 200 kg

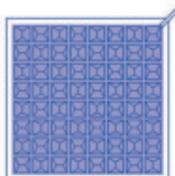

Monocompartimento para usuarios SIN trastorno de la estabilidad. Altura 7 cm.

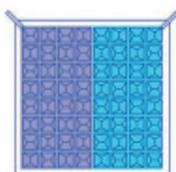


Bicompartimento para usuarios CON trastorno de la estabilidad. Altura 10 m.




Distribuição das pressões num paciente com 172 cm e 75 Kgs.


Almofada em gel de poliuretano viscoelástico

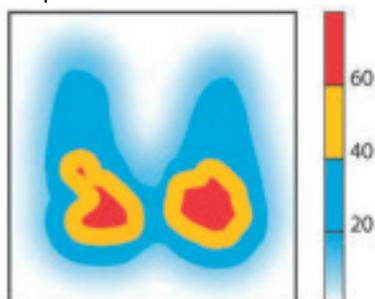

Almofada em espuma HR (alta resiliência) de 6 cm

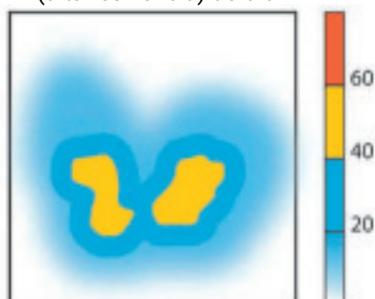

Almofada KINERIS mono compartimento

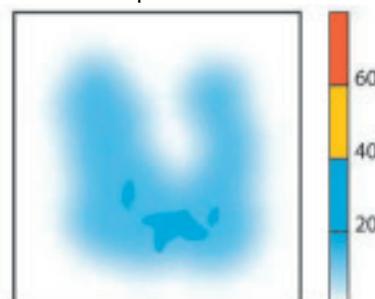

- Corrigir o peso e altura do paciente na matriz de Kineris.
- Identificar o produto recomendado, consultando o código de cores.
- Verificar se a largura da almofada do assento está adaptada à largura da pélvis do paciente.




KINÉRIS® / Capa integral removível. Base antiderrapante

ALTURA DA ALMOFADA 7 CM

Mono Compartimento	BI Compartimento	Peso Paciente Kg	Dimensões A x B
V367-1EL	V367-2EL	40 a 55	28,5 x 28,5 cm
V427-1EL	V427-2EL	40 a 45	28,5 x 33 cm
V497-1EL	V497-2EL	50 a 60	33 x 33 cm
V567-1EL	V567-2EL	40 a 65	33 x 37,5 cm
V667-1EL	-	-	36 x 36 cm
V647-1EL	V647-2EL	50 a 75	37,5 x 37,5 cm
V727-1EL	V727-2EL	50 a 85	37,5 x 42 cm
V817-1EL	V817-2EL	55 a 90	42 x 42 cm
V907-1EL	V907-2EL	85 a 120	42 x 46,5 cm
V677-1EL	-	-	43 x 36 cm
V777-1EL	-	-	43 x 42 cm
V107-1EL	V107-2EL	110 a 120	46,5 x 46,5 cm

A MATRIZ KINERIS

Pressão de Inflação (valores em mmHg)

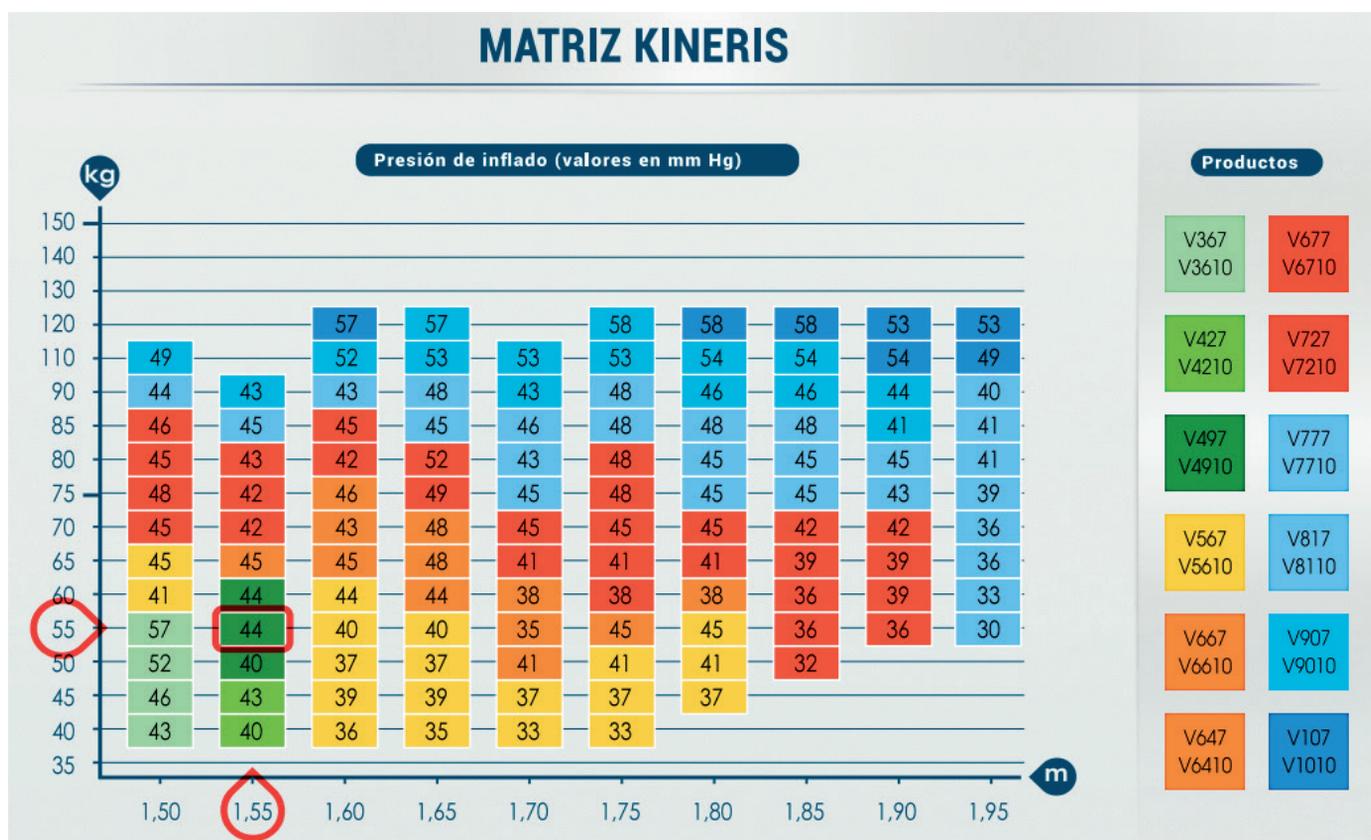

O prescriptor deve assegurar que o paciente ou os seus assistentes possam ajustar o apoio. O prescriptor deve recomendar uma consulta no prazo de um mês.

KINÉRIS® / Capa integral removível. Base antiderrapante

ALTURA DA ALMOFADA 10 CM

Mono Compartimento	BI Compartimento	Peso Paciente Kg	Dimensões A x B
V3610-1EL	V3610-2EL	40 a 55	28,5 x 28,5 cm
V4210-1EL	V4210-2EL	40 a 45	28,5 x 33 cm
V4910-1EL	V4910-2EL	50 a 60	33 x 33 cm
V5610-1EL	V5610-2EL	40 a 65	33 x 37,5 cm
V6610-1EL	-	-	36 x 36 cm
V6410-1EL	V6410-2EL	50 a 75	37,5 x 37,5 cm
V7210-1EL	V7210-2EL	50 a 85	37,5 x 42 cm
V8110-1EL	V8110-2EL	55 a 90	42 x 42 cm
V9010-1EL	V9010-2EL	85 a 120	42 x 46,5 cm
V6710-1EL	-	-	43 x 36 cm
V7710-1EL	-	-	43 x 42 cm
V1010-1EL	V1010-2EL	110 a 120	46,5 x 46,5 cm

CAPA

Capa totalmente amovível, fio SMB em PES FR (poliêster/poliuretano + elastano):

- Transpirável.
- Elástico.
- Elevada resistência à abrasão.
- Resistente ao bolor e à luz.
- Antirrugas.
- Hipoalergénico (Oeko-Tex classe 2).
- Tratamento retardante contra o fogo.
- Lavável a 40°C. (Lavagem pontual possível a 90°C).
- Parte inferior em tecido antideslizante.

NEOPRENO

O nosso material é isento de látex e hipoalergénico.

A sua flexibilidade e forma específica permite ao paciente ser envolvido e sustentado ao longo do dia com a menor pressão possível (em comparação com outras tecnologias de espuma).





MANÓMETRO

- Fornecido de série com manómetro.
- É fornecida uma tabela de equivalência peso/pressão para facilitar o ajuste.



**Ajuste de pressão fácil e precisa,
graças ao sistema de inflação com
manómetro**



WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winnCare.es

Web: winnCare.com

Blog: wearewinnCare.com



@winncarespain

