



UNIVERSAL HAMMOCK med hovedstøtte

Unikt helsejæl med støtte af hele brugerens krop, samt god siddekomfort.

ANVENDELSE

- Til mindre aktive brugere, som skal forblive siddende i sejlet i længere perioder.
- Anvendes til forflytninger fra liggende stilling.
- Til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

EGENSKABER

- Sejlet lægges på i liggende stilling fra seng eller badeleje.
- Sejlet giver en god støtte af kroppen, og derved får brugeren en oplevelse af komfort, stabilitet og tryghed.
- Sejlet former sig efter kropsholdningen og giver samtidig brugeren en opret-siddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejle med hovedstøtte anvendes til brugere, som har behov for ekstra støtte omkring overkrop og hoved.
- Universal Hammock har udelte benstropper.

SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

Materiale: Polyester Net

Størrelser: XS-S-M-L-XL-XXL

VARENUMRE:

Universal Hammock med hovedstøtte, polyester net:

	Varenr.	HMI-nr.
XS	009-09683	84967
S	009-09684	84978
M	009-09685	84979
L	009-09686	84983
XL	009-09687	84982
XXL	009-09688	84980




STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:

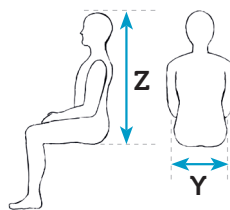

	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (mål fra hoved til bagdel)	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncaare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncaare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncaare.dk for mere info herom.



KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncaare.com

E-mail: info@winncaare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN  CARE