


À commander sur le site (35) Miniac-Morvan



Score sur l'Échelle de Braden

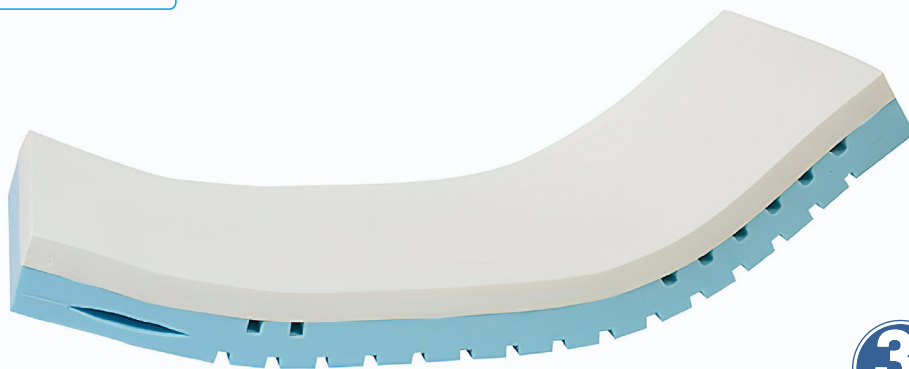

Caractéristiques produits répondant aux bénéfiques patients

- ▶ Couche supérieure en mousse viscoélastique $\geq 75 \text{ kg/m}^3$
- ▶ Base en mousse HR $\geq 34 \text{ kg/m}^3$
- ▶ Épaisseur des 2 couches : 17,5 cm
- ▶ Disponible en 1 largeur : 90 cm
- ▶ Dimension de couchage : 200 x 90 cm
- ▶ Poids matelas : $\sim 17,5 \text{ kg}$
- ▶ Housse : PHARMATEX 3 côtés
- ▶ 2 types de conditionnements



VITA FORM 4

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à **RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.

40 ≤ 150kg



NORMES NON FEU
EN 597 part 1 & 2



296,62€ TTC avec PLV
- CODE 1260602 -

LES + PRODUIT

- Un produit unique et taillé sur mesure pour prévenir des escarres.
- Des découpes internes pour aérer la mousse viscoélastique et limiter les risques de macération.
- Des découpes externes pour épouser naturellement la cinématique du lit.
- Le matelas le plus épais du marché avec une base mousse de forte densité, pour garantir Confort et Robustesse.

HOUSSE	CARTON INDIVIDUEL	ROULÉ COMPRIMÉ (RC) Par 6 unités
	17.17413J	17.17413J.X6



PRÉVENTION DES ESCARRES

L'immersion du corps, grâce à une mousse viscoélastique à mémoire de forme, permet de répartir le poids du corps (intensité de la force) sur une surface plus importante, ce qui réduit les points de pression exercés sur les zones à risque(s) d'escarre(s), quelque soit la morphologie du patient.



GESTION DES TALONS

Grâce à une découpe interne unique, le matelas VITA FORM 4 assure une meilleure immersion du segment jambier et un allègement des pressions au niveau des talons.



ROBUSTESSE

Combinée à une découpe unique permettant de mieux absorber la cinématique des lits médicalisés, la conception innovante du VITA FORM 4 avec une hauteur de 17,5 cm et une base en mousse de haute densité assure une meilleure durée de vie du matelas.

CONFORT

L'**immersion du corps**, grâce à une mousse viscoélastique à mémoire de forme, permet de répartir le poids du corps (intensité de la force) sur une surface plus importante, ce qui **réduit les points de pression** exercés sur les zones à risque(s) d'escarre(s), quelque soit la morphologie du patient.

Le matelas VITA FORM 4 apporte un grand confort de couchage de part ses découpes uniques :

- ▶ 2 découpes en tête et pied de lit qui permettent d'assouplir la mousse et facilitent la circulation d'air et donc limitent les effets de sudation/macération.
- ▶ 3 zones de différentes fermetés (Tête / sacrum / Talon).
- ▶ une découpe externe qui permet de mieux absorber la cinématique du lit et optimiser le confort.

