



## DIGITAL VÆGT

Ved medicinering af patienter, som ikke er mobile, kan denne medicinsk godkendte vægt veje patienten i f.eks. et sejl.

Vægten har et stort letlæseligt display og multifunktionsknapper inkluderet med On/Off/0/Tare (nulstilling).

Vægten kan veje patienter op til 300 kg. Den har en nøjagtighed på 0,1kg, og kan derfor benyttes som medicinsk vægt.

Med funktionen HOLD er det muligt at aflæse 5 til 10 sæt af målinger og herefter analysere eventuelle forskelle.

Tare-funktionen gør det muligt at trække ekstra vægt, som tøj eller sejl fra den samlede vægt.

Vægt med dobbeltåg kan monteres og fjernes på få sekunder. Det er en meget fleksibel løsning, som kan monteres på næsten alle modeller af lifte, så længe de er udstyret med standard 2-punktsåg med kroge. Den praktiske monteringsstrop og beslaget kan indstilles i bredden for at kunne bruges med forskellige størrelser åg.

## VIGTIGE STANDARD-FUNKTIONER


- On/Off/0/Tare (nulstilling) knapper
- HOLD-knap
- Stort letlæseligt display
- Vægtkapacitet op til 300 kg
- Nøjagtigheden er 0,1 kg

## VARENUMRE


Version	Montering	Varenummer
Vægt uden åg (Luna)	Strop	017-00133
Vægt med 2-punktsåg (58 cm) (Luna/Solar)	Bayonet	017-00117
Vægt med 2-punktsåg (48 cm) (Luna/Solar)	Bayonet	017-00144
Vægt med 3-punktsåg (Luna/Solar)	Bayonet	017-00143
Vægt med dobbeltåg (Luna/Solar)	Strop	017-00113

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Vægt for Luna med strop

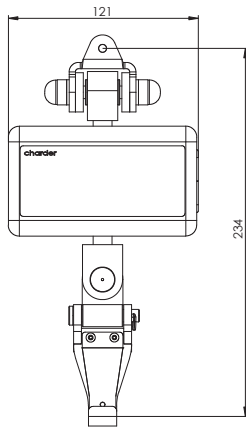


Vægt for Luna med bajonet

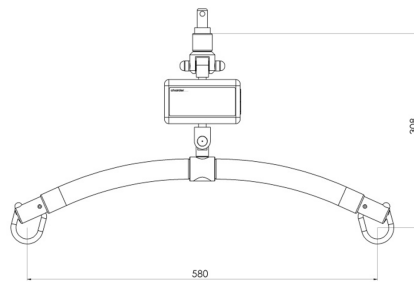


Vægt på Solar med 3- punktsåg

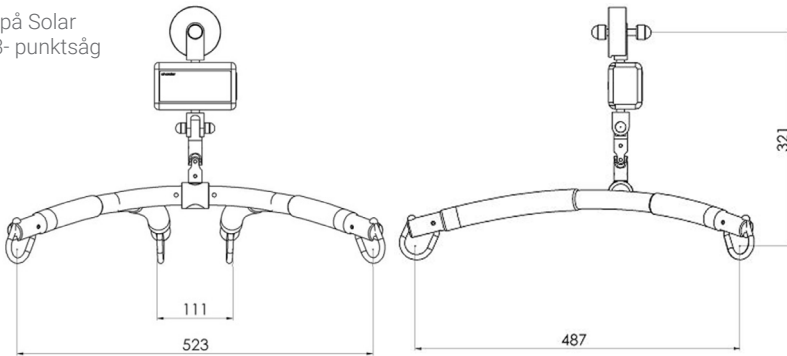

Vægt på Solar med 2- punktsåg

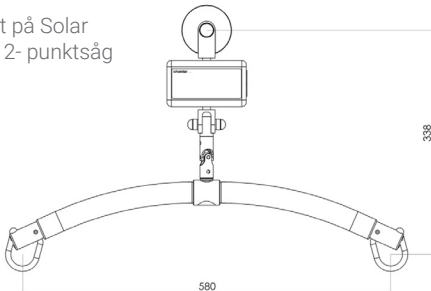

Vægt med dobbeltåg

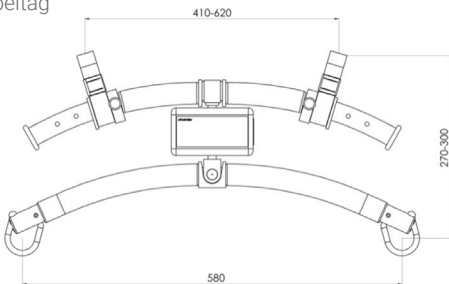

On/Off/Zero/Tare (nulstilling) og Hold knap



Stort letlæseligt display



Let at anvende og aflæse

### Kontakt os for mere information

[www.winnocare.com](http://www.winnocare.com)

Email: [info@winnocare.dk](mailto:info@winnocare.dk)

Tlf: +45 7027 3720



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan afvige alt efter situation. Winnocare forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne. Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Kontakt Winnocare eller din forhandler for spørgsmål eller mere information

WIN  CARE