

LETTO X'PRESS

2^a generazione

QUESTO PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE. È STATO PROGETTATO E FABBRICATO CONFORMEMENTE ALLE NORME IN VIGORE CEI 60601-2-52.

• **Ergonomia:** l'ergonomia meccanica del letto permette all'installatore di rispettare le posizioni raccomandate al fine di prevenire i DMS (Disturbi Muscolo Scheletrici) durante le operazioni di consegna, montaggio e smontaggio del letto. Il suo ingombro ridotto, nonché la sua conservazione sulle sue ruote facilitano i suoi spostamenti in qualsiasi tipo di situazione (ascensori, veicoli di piccole dimensioni...).

• **Semplicità:** le operazioni di montaggio e smontaggio sono molto facili. Non occorre usare alcun utensile per la loro esecuzione. Pezzi di colore blu sono associati a funzioni. Il loro ruolo consiste a guidare le operazioni di assemblaggio del letto.

• **Sicurezza:** il nuovo sistema di fissaggio dei pannelli «Easy Move» evita di perdere i fissaggi rotondi e assicura una sicurezza ottimale del fissaggio dei pannelli al letto. Il percorso dei cavi riduce le trazioni e i rischi di deterioramento.





Trasformazione del carrello autoportante in telaio.




Bloccaggio della 1/2 rete piedi in posizione orizzontale.



Accoppiamento delle due 1/2 reti con i fissaggi rotondi attraversanti.

EASY MOVE

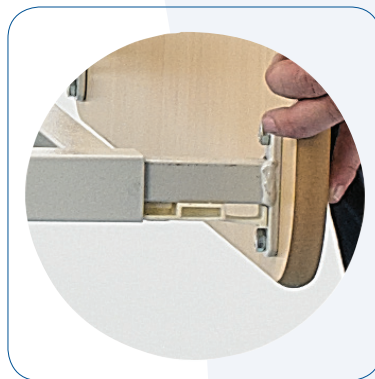

Fissaggio dei pannelli tramite il sistema EASY MOVE: semplice, rapido e sicuro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	ALTEZZA VARIABILE	SOLLEVA BUSTO	SOLLEVA GAMBE	CARICO NORMALE D'USO	RUOTE	NORME	TENUTA STAGNA
X'PRESS 2^a generazione 2 funzioni	Letto montato 90x200cm rete doppia	34-64 cm	0° - 75°	12° cremagliera	170 kg materasso 20 kg paziente 135 kg accessori 15 kg	Diam. 100 mm freno senza parafilo	CEI 60601-2-52	Motonizzazione scatola UNAK IP66
X'PRESS 2^a generazione 3 funzioni senza piegatura delle ginocchia	Letto in posizione stoccaggio: 50 cm di larghezza, 90 cm di lunghezza, 160 cm di altezza			13,5° elettrico				Telecomando bloccabile UNAK IP54
X'PRESS 2^a generazione 3 funzioni con piegatura delle ginocchia				Piegatura delle ginocchia 26° e 16° regolazione dei piedi mediante cremagliera				

- 2 supporti accessori (sui piani lunghi)
- 2 supporti asta porta-siero (situati nella testata del letto)
- 2 supporti braccio di sostegno (situati nella testata del letto)

Garanzia struttura meccanica, martinetti e telecomando 5 anni*.
Garanzia pannelli e accessori 1 anno*.
*In condizioni normali d'uso e fuori pezzi d'usura – vedi istruzioni riportate nel manuale d'uso.

