

CAMA X'PRESS

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

• **Ergonómica:** A ergonomia mecânica da cama permite ao instalador respeitar as posturas recomendadas para prevenir o DMS (Distúrbio Músculo-Esquelético) durante a entrega, montagem e desmontagem da cama. O pouco espaço ocupado e a armazenagem sobre as suas próprias rodas facilita o deslocamento em qualquer situação (em elevadores, pequenos veículos, etc.). Cama autoportante sem kit de transporte.

• **Simplicidade:** Facilidade e rapidez na montagem e desmontagem sem necessidade de ferramentas. Dispositivos na cor azul associados às funções. A sua função é guiar a montagem da cama.

• **Segurança:** O novo sistema de fixação dos painéis "Easy Move" impede a perda das porcas e garante a fixação dos painéis à cama. A distribuição dos cabos reduz a tração e o risco de deterioro.



Cama X'PRESS 2ª geração autoportante




Conversão do carro autoportante a partir do chassis.



Bloqueio de 1/2 sommier para os pés na posição horizontal.



União das 2 metades do sommier por meio de passadores.

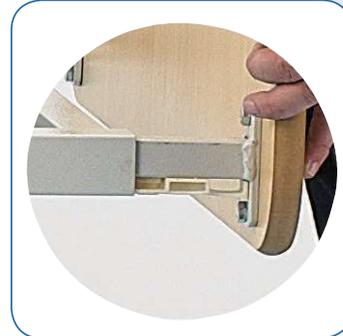

Fixação dos painéis pelo sistema EASY MOVE: simples, rápido e seguro.

KIT DE TRANSPORTE DISPONÍVEIS:



A626-00



A627-00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	ALTURA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE E EE
X'PRESS 2ª GERAÇÃO 3 funções elétricas Com dobra para os joelhos Ref. IXO3L08100de	Cama montada: 90x200 cm. Sommier divisível	De 34 a 84 cm. Distância do chão: 13 cm.	75°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	170 kg. Colchão 20 kg, paciente 135 kg, acessórios 15 kg.	Ø100 mm.	CEI 60601-2-52	Motorização e caixa Linak IP66 Botãoeira com bloqueio Linak IP54

Dimensões da cama na posição de armazenagem: Largura 50 cm - Comprimento 90 cm - Altura 160 cm



* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo mastro com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo barra de levantamento (na cabeceira da cama)

Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
 Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.